


Thermofix 2000

Erstelldatum: 18.11.2014

Überarbeitet am: 



*Beispielabbildung

Bitte ausschließlich Wachsmodellationen verwenden (keine Tiefziehkäppchen)!

Diese Angaben gelten nur für die Verwendung von System **Thermofix 2000**

Angaben bezogen auf 160g!

Bestandteile

- 1) Vestofix (Einbettmasse)
- 2) Trichterformer
- 3) Schiene
- 4) Thermofix (Ringfolie)
- 5) Silikonspray
- 6) Niadur, BiodurSoft o. ä.

**NE-Legierungen
Ni-Cr, Co-Cr**

160 g = 38 ml


11 ml H₂O → 27 Expansionsliquid
(exakte Passung)

13 ml H₂O → 25 ml Expansionsliquid
(strenge Passung)

Thermofix 2000

Erstelldatum: 18.11.2014
Überarbeitet am: / /

38 ml = 100%		
Liquid		H ₂ O dest.
ml	Prozent	ml
15	ca.39%	23
16	ca.42%	22
17	ca.45%	21
18	ca.47%	20
19	ca.50%	19
20	ca.53%	18
21	ca.55%	17
22	ca.58%	16
23	ca.60%	15
24	ca.63%	14
25	ca.66%	13
26	ca.68%	12
27	ca.71%	11
28	ca.74%	10
29	ca.76%	9
30	ca.79%	8

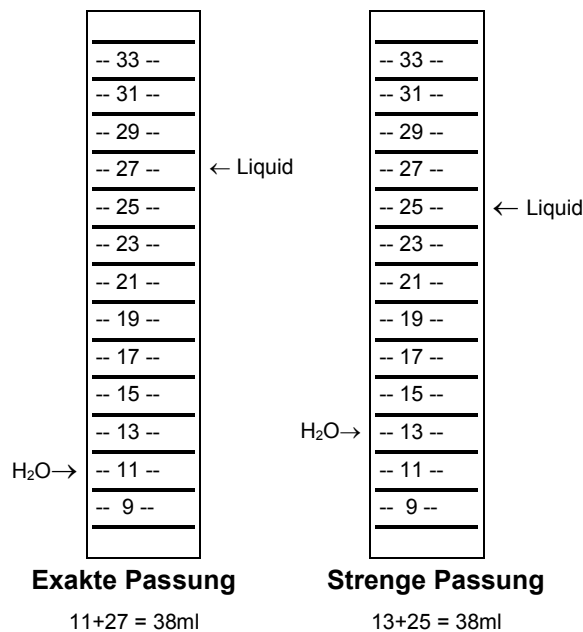

1ml Expansionsliquid mehr = 3% (höhere Expansion)

Weitere Auskünfte per mail: info@dfs-diamon.de

Rev. 11/14



DFS-Diamon GmbH
Ländenstraße 1
93339 Riedenburg
Germany