

Kérjük, hogy kizárólag viaszmodelleket használjon (mélyhúzó sapka nélkül)!

Ezen adatok csak a **Thermofix 2000** rendszer használatára érvényesek


Az adatok 160 g-ra vonatkoznak!

Alkotóelemek:

- 1) Vestofix (beágyazó massa)
- 2) Tölcsérformázó
- 3) Sín
- 4) Thermofix (gyűrűfólia)
- 5) Szilikonspray
- 6) Niadur, BiodurSoft, vagy hasonló.

NE-ötvözetek Ni-Cr, Co-Cr
160 g = 38 ml
11 ml H ₂ O → 27 tágító folyadék (pontos illeszkedés)
13 ml H ₂ O → 25 ml tágító folyadék (szoros illeszkedés)

38 ml = 100%		
Folyadék		H ₂ O dest.
ml	Százalék	ml
15	kb.39%	23
16	kb.42%	22
17	kb.45%	21
18	kb.47%	20
19	kb.50%	19
20	kb.53%	18
21	kb.55%	17
22	kb.58%	16
23	kb.60%	15
24	kb.63%	14
25	kb.66%	13
26	kb.68%	12
27	kb.71%	11
28	kb.74%	10
29	kb.76%	9
30	kb.79%	8

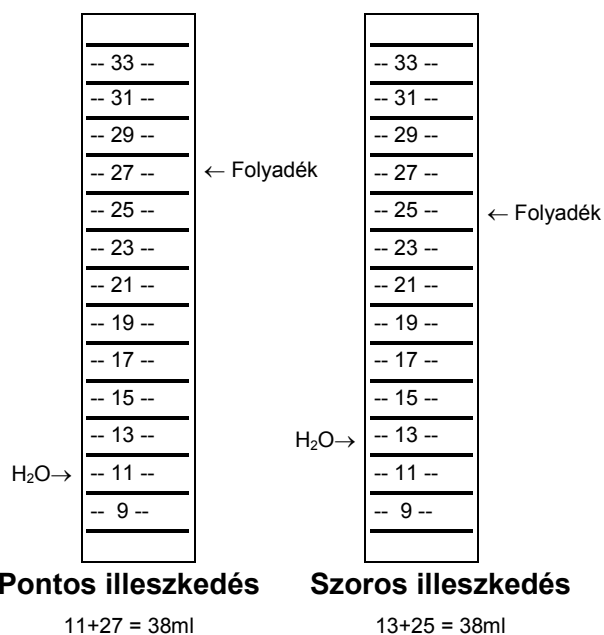

1ml tágító folyadék = 3% (Jelentős bővítése)

További tájékoztatás e-mailen keresztül: info@dfs-diamon.de

Gyártó:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14