

## Utiliser exclusivement des modèles en cire (pas de capuchons de thermoformage) !

Ces indications s'appliquent uniquement pour l'utilisation du système **Thermofix 2000**


Indications pour 160 g !

Composition :

- 1) Vestofix (revêtement)
- 2) Cône de coulée
- 3) Gouttière
- 4) Thermofix (champ à anneau)
- 5) Spray de silicone
- 6) Niadur, BiodurSoft ou similaire

<b>Alliages non précieux Ni-Cr, Co-Cr</b>
<b>160 g = 38 ml</b>
11 ml H <sub>2</sub> O → 27 ml liquide à expansion <b>(dosage précis)</b>
13 ml H <sub>2</sub> O → 25 ml liquide à expansion <b>(dosage fixe)</b>

<b>38 ml = 100 %</b>		
<b>Liquide</b>		<b>H<sub>2</sub>O dist.</b>
<b>ml</b>	<b>Pourcentage</b>	<b>ml</b>
15	env. 39 %	23
16	env. 42 %	22
17	env. 45 %	21
18	env. 47 %	20
19	env. 50 %	19
20	env. 53 %	18
21	env. 55 %	17
22	env. 58 %	16
23	env. 60 %	15
24	env. 63 %	14
25	env. 66 %	13
26	env. 68 %	12
27	env. 71 %	11
28	env. 74 %	10
29	env. 76 %	9
30	env. 79 %	8

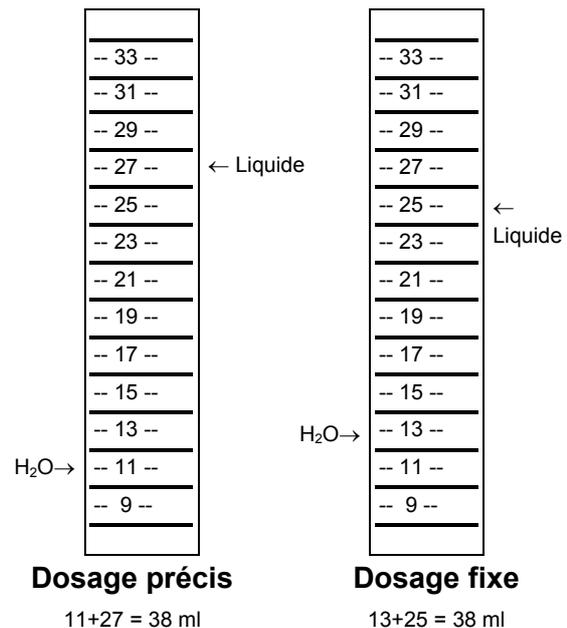

**1 ml liquide à expansion supplémentaire = 3 % (expansion supérieure)**

Autres informations par courriel : [info@dfs-diamon.de](mailto:info@dfs-diamon.de)

**Fabricant :**

DFS-Diamon GmbH \* Ländenstrasse 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

Rév. 11/14